


Masāžas paklājs SHIATSU MAT FE-8301

Lietošanas instrukcija

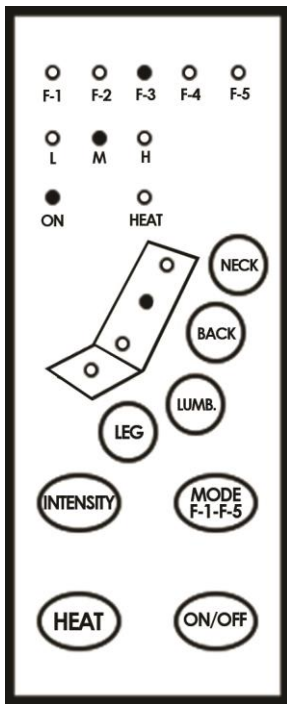


Norādījumi lietošanai: Nenovietojiet vai neizmantojiet paklāju vannas istabā vai mitrās vietās, pasargājiet no ūdens – tas var sabojāt vai samazināt produkta kalpošanas laiku. Pārliecinieties, ka masāžas paklājs nav pakļauts tiešai saules staru iedarbībai vai novietots tuvu radiatoram vai citiem siltuma avotiem. Nelietojiet paklāju uz koka virsmas, lai novērstu bojājumus vai skrāpējumus. Šajā masāžas paklājā ir unikāla sistēma, kas ļauj piestiprināt paklāju gandrīz katrai gultai. Novietojiet paklāju vietā un stingri piestipriniet elastīgās siksnas ap gultni. Tad paklājs neslīdēs. Pievienojiet adaptera rozeti kontaktligzdai un nostipriniet elastīgās siksnas pie gultas, lai jūs varētu pilnībā izbaudīt atbrīvojošu masāžu. **Funkciju pārskats:** <ON/OFF> Ieslēgšanas / Izslēgšanas poga: Ieslēdz / Izslēdz ierīci. <HEAT> Siltuma poga: Ieslēdz / Izslēdz apsildi. <INTENSITY> Intensitātes regulēšanas poga: Pastāv 3 intensitātes līmeņi. <MODE F1-F5> Masāžas režīma izvēles Poga: Ir 5 dažādi masāžas režīmi: PULLING, POKLEY, WAY, FINE MASSAGE un AUTOMATIC. Automātiskais režīms automātiski maina atsevišķus masāžas režīmus. <NECK(KAKLA)/BACK (MUGURA) /LUMBAR(GURNI)/ LEG(KĀJAS)> Pašu izvēlētā masāža: pielāgojiet sev vēlamo masāžas zonu. Nospiežot ieslēgšanu /izslēgšanu, tiek aktivizētas/izslēgtas dažādas masāžas paklāja daļas: kakla, muguras, gurnu, kāju zona. **Tehniskās**

specifikācijas: Barošanas avots: 12V DC/1200mA; Max.jauda: 24W. **Svarīgi drošības norādījumi:** Ja ierīce netiek izmantota vai jūs to vēlaties tīrīt, vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai citās vietās kur tā varētu samirkst. Ja kontaktdakšas savienotājs ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam speciālistam. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai adapteris un produkts ir saderīgi ar strāvas avotu. Ierīce nav paredzēta lietošanai maziem bērniem, ja tie netiek pastāvīgi uzraudzīti. Šī ierīce nav rotaļlieta, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu bērni ar to nespēlējas un uzglabājat to bērniem nepieejamā vietā. Pirms ierīces tīrīšanas, remonta, apkopes vai pārvietošanas, adapteris ir jāatslēdz no elektrības kontaktligzdas. Izmatojot ierīci, nelietojiet asus priekšmetus, kuri var pārdurot vai saskrāpēt ierīci, tas var izraisīt iekšējā aprīkojuma bojājumus. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai strāvas vads nav bojāts, un tajā nav mezglu. Ierīce nesatur komponentus, kurus lietotājs var labot pats. Tāpēc nemēģiniet labot, izjaukt vai modificēt ierīci mājās. **Tīrīšana un apkope:** Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un ļaujiet tai atdzist. Notīriet ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru sūkli. Nekādā gadījumā neļaujiet ierīcei samirkst. Negremdējiet ierīci šķidrumā, lai to mazgātu. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas, benzīnu, petroleju, mēbeļu pulēšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Neizmantojiet ķīmikālijas ierīces tīrīšanai, tas var to sabojāt. Masāžas paklājs ir paredzēts tikai lietošanai mājās apstākļos vai automašīnā. Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētiem mērķiem. Nelietojiet masāžas paklāju, ja tas ir bojāts jebkādā veidā. Ierīces pārbaudi un remontu veic tikai kvalificēts meistars. Nekad neaizsedziet ierīci, ja tā ir ieslēgta. Neizmantojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm. Nelietojiet paklāju, ja tas ir salocīts vai saliekts. **Uzmanību!** Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ." **Ierīces garantija neattiecas:** • Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. • Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). • Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. • Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. • Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. **Importētājvalsts: Čehijas Republika**

Массажный коврик SHIATSU MAT FE-8301

Инструкция по применению

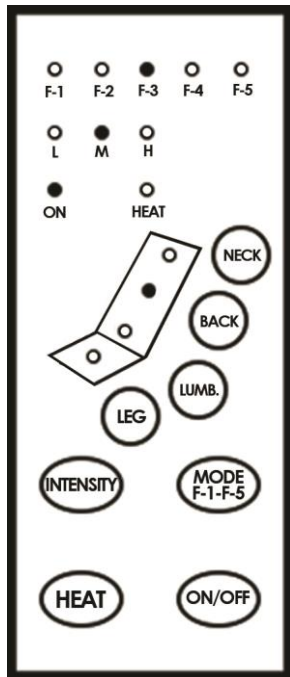

Указания по использованию: Не устанавливайте и не используйте коврик в ванной комнате или других влажных местах. Избегайте попадания воды – иначе может сократиться срок службы этого устройства. Убедитесь, что массажный коврик не находится на прямых солнечных лучах или не установлен вблизи батарей или других источниках тепла. Во избежание повреждений и царапин не используйте коврик на деревянных поверхностях. Массажный коврик оснащен уникальной системой, которая позволяет прикрепить его практически к каждой кровати или креслу. Чтобы вы могли полностью насладиться расслабляющим массажем, подключите адаптер к розетке и закрепите эластичные ремни на кровати. **Функции пульта <ON/OFF>** Кнопка Включения/ Выключения. Включает или выключает устройство. **<HEAT/ HEAT>** Кнопка нагрева. Включает или выключает нагревание. **<INTENSITY>** Кнопка регулировки интенсивности. Регулирует интенсивность массажа. Имеет 3 вида интенсивности. **<MODE F1-F%>** Кнопка выбора режима массажа. Имеет 5 различных режимов массажа: PULLING, POKLEY, WAY, FINE MASSAGE un AUTOMATIC. **<NECK (KAKLA) / BACK (MUGURA) / LUMBAR (GURNI) / LEG (KĀJAS)>** Мануально выбранный массаж: выберите желаемую зону массажа. При нажатии кнопки Включить / Выключить активизируются или выключаются различные

части коврика: зоны шеи, спины, бедер или ног. **Технические характеристики:** Источник питания: 12V DC /1200mA; Максимальная мощность: 24W; **Важные меры безопасности:** Если устройство не используется или вы хотите его почистить, всегда отключайте устройство от электросети. Не используйте устройство вблизи воды или в других местах, где оно может намочнуть. Если вы констатировали повреждение электропровода или вилки, их незамедлительно должен заменить квалифицированный специалист. Перед использованием убедитесь, соответствует ли напряжение в сети техническим характеристикам устройства. Устройство не предназначено для использования маленькими детьми, если они не находятся под пристальным надзором. Это устройство не игрушка, поэтому убедитесь, что ваши дети с ней не играют, и храните его в недоступном для детей месте. Перед очисткой, ремонтом, уходом или транспортировкой, адаптер необходимо отключить от электросети. Используя устройство, не используйте и не держите рядом острые предметы, которые могут проткнуть или поцарапать устройство, что может привести к внутреннему повреждению механизмов устройства. Перед использованием убедитесь, что электропровод не поврежден и на нем нет узлов. Устройство не содержит компонентов, которые пользователь может починить сам. Поэтому не пытайтесь ремонтировать, разбирать или улучшать устройство сами в домашних условиях. **Уход:** Перед тем, как чистить устройство, отключите его от электросети и дайте ему остыть. Очистите устройство мягкой и не много намоченной тряпочкой или губкой. Ни в коем случае не дайте устройству намочнуть. Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Для ухода за устройством никогда не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, растворители или средства для полировки мебели. Не используйте для очистки химикаты, они могут испортить устройство. Массажный коврик предназначен только для использования в домашних условиях. Используйте устройство только в предназначенных для него целях. Не используйте массажный коврик, если он каким-либо образом поврежден. Проверку и ремонт устройства проводит только квалифицированный мастер. Никогда не накрывайте или не кладите какие-либо предметы на устройство, если оно включено. Не используйте устройство дольше 15 минут. Не используйте коврик, если он сложен или согнут.

Внимание! Использование этого продукта связано с личной гигиеной. Правила No. 255 Кабинета министров «Правила о дистанционном договоре» пункт 22, подпункт 5 определяют что: «Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку товара, который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям.» **Гарантия не распространяется на:**

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
 - Естественный износ устройства в результате длительного использования.
 - Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
 - Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
 - Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.
- Страна-поставщик: Чешская Республика.**