

Limfodrenāžas zābaki BG-S-1981 Lietošanas instrukcija



Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Paredzētā izmantošana:

Limfodrenāžas masāža kājām.

Tehniskie parametri:

Jaudas padeve: AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (vai 4 gabali AA 1.5V - nav iekļautas).

Patēriņš: 1.8 W

Spiediena diapazons: 10-40 kPa

Kontrindikācijas (Lietošanas ierobežojumi):

A) Absolūti nedrīkst lietot:

- Zīdīšanas laikā;
- Grūtniecība (grūtniecības laikā līdz 3 mēnešiem).

B) Ar ārsta konsultāciju (Pēc ārsta ieskatiem):

- Karcinomas (vēzis);
- Akūtas infekcijas (vīrusu un baktēriju infekcijas);
- Glaukoma (glaukoma);
- Augsts acu spiediens;
- Sirds slimības;
- Pastiprināta vairogdziedzera darbība;
- Nopietnas aknu slimības;
- Bronhiālā astma;
- Vēnas (varikozas vēnas);
- Augsts asinsspiediens;
- Nieru slimības.

Brīdinājums:

Pirms produkta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Personām ar šādām veselības problēmām pirms ierīces lietošanas būtu jākonsultējas ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu:

- Augsts asinsspiediens
- Vāja sirds
- Osteoporoze
- Lūzumi, sastiepumi, muskuļu spazmas
- Akūtas slimības
- Ļaundabīgs audzējs
- Akūtas vai strutojošas fascīta
- Menstruācijas laikā
- Grūtniecības laikā
- Drudža laikā (virs 38 ° C)
- Anēmija
- Personām ar ādas jutīgu, iekaisumu vai citām ādas slimībām
- Personām, kuras ārstējas
- Personām, kas cieš no galvassāpēm, kuņģa un ar ādu saistītām sāpēm
- Lietojot alkoholu
- Lietojot citas ārstniecības līdzekļus vai ārstniecības laikā
- Citas anomālijas
- Neizmantojiet citā veidā, un citiem mērķiem tikai kā aprakstīts instrukcijā

Brīdinājums:

Ikreiz, kad jūs izmantojat elektroiekārtas, ievērojiet pamata drošības noteikumus:

- Sargājiet iekārtu no ūdens, elektriskās detaļas var būt aktīvas arī pēc to atslēgšanas no strāvas avota.
- Vienmēr pēc ierīces izmantošanas atvienojiet adapteri. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties izslēdziet to.
- Nekad nenovietojiet /neglabājiet ierīci vietās, kur tā var nonākt saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu, piemēram, vannā, izlietnē, tualetē u.tml.
- Lai samazinātu uguns, elektrošoka vai cita veida traumu risku neatstājiet, iekārtu bez uzraudzības, ja ierīce ir pievienota elektriskajam tīklam un/vai ieslēgta.
- Lietojot ierīci neizmantojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Vienmēr ievērojiet visus norādījumus, kas aprakstīti šajā instrukcijā.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:

- Kad mazgājaties vai esot dušā
- Ja elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti
- Ja ierīce nedarbojas pēc kritiena vai trieciena.
- Pēc ierīces samirkšanas.
- Pēc citiem bojājumiem
- Ja esat miegains vai stipri noguris.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.


Šis produkts nav medicīnas ierīce! Iekārta ir jāizmanto tikai mājas apstākļos. Šis produkts negarantē jebkāda veida veselības efektus. Mēs iesakām pirms ierīces izmantošanas konsultēties ar ārstu.

Kā šī ierīce darbojas?

Zābaki ar gaisa spiedienu viegli masē kājas. Vienmēr pirms izmantojiet ierīci pārbaudiet vadības bloku. Ierīcei nepieciešams četras 1.5V AA tipa baterijas (nav iekļautas komplektācijā) - iesakām sārma baterijas, lai iegūtu labākus rezultātus, vai 230V adapteris / DC 9V / 200 mA (ir iekļauts komplektācijā).

Komplektā ietilpst:

- C - 2x limfodrenāžas zābaki apakšstilbam
- B - 2x limfodrenāžas manšetes augšstilbiem
- A - 1x vadības bloks
- D – 1x iepakojums savienojuma caurules
- E – 1x AC / DC adapteris

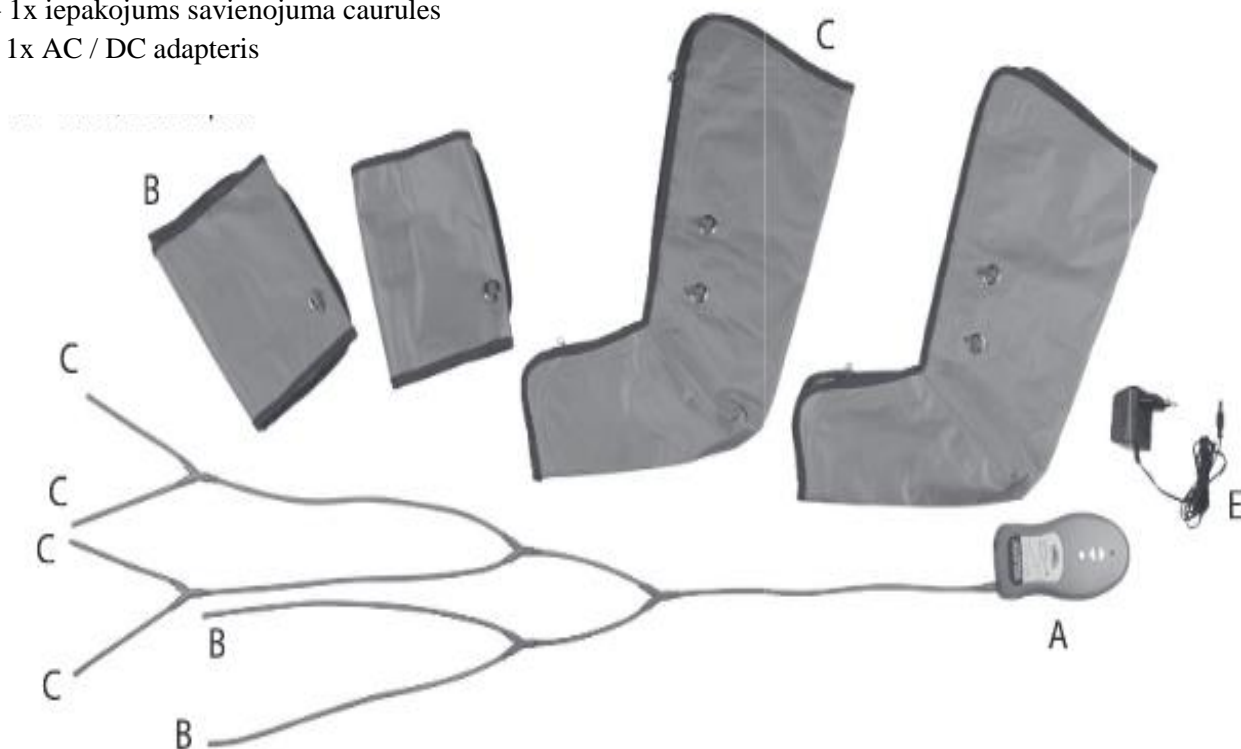


Kontrole:

Ierīci ir viegli kontrolēt. Jūs varat to izmantot, gan sēžot, gan guļot. Lai izbaudītu masāžu – ieslēdziet ierīci, zābaki un manšetes automātiski piepūtiesies, un atslābs tā masējot Jūsu kājas un palīdzot Jums atbrīvoties no stresa un noguruma. Ierīce nodrošina patīkamu kompresijas masāžu. Maigi, un saudzīgi atbrīvo no sasprindzinājuma un uzlabo asinsriti.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

1. Uzvelciet masāžas zābakus uz kājām (C) un masāžas manšetes (B) jums ērtā vietā virs ceļa. Pārliecinieties, ka rāvējslēdzējs uz zābakiem ir pilnībā aizvilkts.
2. Masāžas zābakiem (C) un manšetēm (B) pievienojiet vadības bloku (A), izmantojot savienojuma caurules (D).
3. Pārliecinieties, ka vadības bloks ir izslēgts. Vispirms pievienojiet AC / DC adapteri vadības blokam, tad pievienojiet AC / DC adapteri kontaktligzdai.
4. Ja vēlaties izmantot baterijas, ievietojiet tās bateriju nodalījumā vadības bloka aizmugurē. Pārliecinieties, ka izmantojat tā paša veida baterijas (nelieciet kopā vecās baterijas ar jaunām vai dažādu tipu baterijas). Ievērojiet pareizu bateriju polaritāti.
5. Nospiediet "POWER" pogu uz vadības bloka, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam ieslēdzas LED indikators. Ja vēlreiz nospiedīsiet "POWER" pogu, ierīce izslēgsies.
6. Ieslēdzot zābakus automātiski ieslēdzas "6" pozīcija.
7. Regulējiet masāžas kompresiju nospiežot pogas "UP" vai "DOWN".

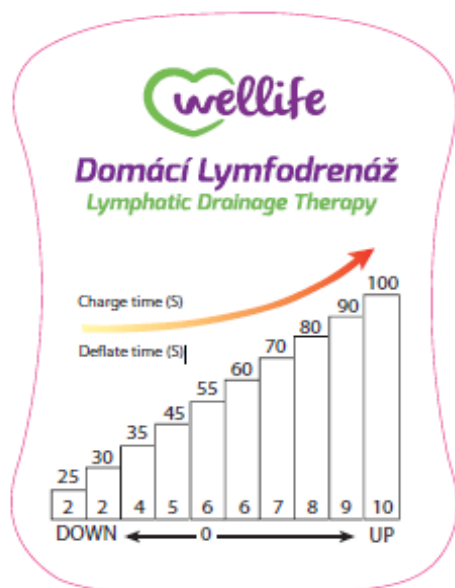

Charge time (S):
= kompresija (sekundes)
Deflate time(S) :
= deflācija (sekundēs)

Piem.:
Līmenis "0" = 54s Kompresija / 6s deflācija.
UP → ilguma iestatījums masāžai,
izmantojiet UP pogu.

8. Masāžas zābakus kājām (C) un masāžas manšetes augšstilbiem (B) var izmantot kopā vai atsevišķi.
9. Ieteicamais masāžas laiks 5 min., pēc tam ierīce jāizslēdz uz 3-5min. Pēc 3-5min. varat atkārtot masāžu vēlreiz.
10. Pēc masāžas, no ierīces atvienojiet caurules, deflācijas veikšanai, lai jūs varētu ērti noņemt zābakus un manšetes.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Svarīgi!

Nemazgājiet zābakus vai manšetes veļas mašīnā. Nemazgājiet ar ķīmikālijām vai balinātājiem. Tīriet ierīci noslaukot to ar mitru drānu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas lietošanas instrukcijā, un nav atbildīgs par iespējamām drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti var atšķirties no faktiskās ierīces atkarībā no modeļa.

Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnās **ierīce**.

Importēts no Čehijas Republikas.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.