

Zobu Birste Family SONIC
(modelis: SA605)
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient, paldies par uzticību, ko izrādījāt, iegādājoties šo produktu. Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.

Drošībai:


Aizsargājiet produktu no ūdens:

1. Neiegremdējiet ierīces korpusu ilgstoši ūdenī vai citos šķidrumos.
2. Regulāri pārbaudiet, vai birstes korpusā nav plaisu vai citu bojājumu un vai sari nav vaļīgi.

Brīdinājums:

1. Izmantojiet šo produktu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
2. Bērni ierīci drīkst lietot tikai pilnvarotas personas pārraudzībā.
3. Ja zobu pastā ir peroksīds, soda vai cits bikarbonāts, pēc lietošanas, rūpīgi notīriet birstes galviņu un rokturi.
4. Ja, ierīci lietojot, rodas nepatīkamas sajūtas vai sāpes mutē, pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar savu zobārstu.
5. Neatstājiet zobu birsti vietā, kur ir augsta temperatūra, putekļi, sāls, ķīmiski tīrīšanas līdzekļi.


Daļu apraksts:

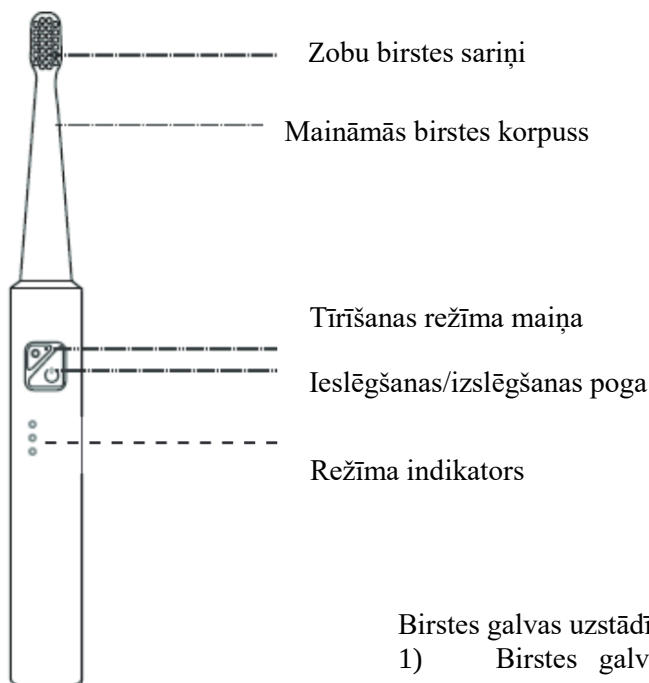

- 1) Birstes galvas uzstādīšana: Sarindojiet rievu uz birstes galvas pamatnes

ar rievas pretzīmi uz ierīces korpusa un ievietojiet to. Pagriezieties pa kreisi atbilstoši bultiņai, līdz dzirdat klikšķi (skat. attēlu A).

- 2) Lai noņemtu birstes galviņu: Satveriet birstes galvu. Pagriezieties pa labi atbilstoši bultiņas virzienam. Izvelkat birstes galviņu (skat. attēlu B).

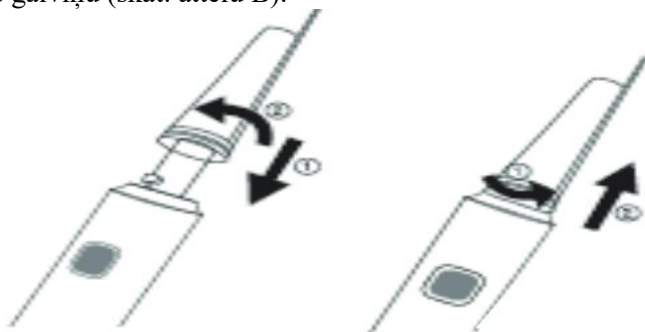

Kā lietot zobu birsti:

1. Noņemiet zobu birstes galvas aizsargapvalku.
 2. Samitriniet zobu birsti un uzklājiet zobu pastu.
 3. Turiet zobu birsti uz zobiem/smaganām ar nelielu spiedienu.
 4. Nospiediet pogu "ON / OFF", sāciet tīrīt zobus
 5. Lai mainītu režīmu, nospiediet pogu "režīms".
 6. Viegli un lēni pārvietojiet birsti starp zobiem. Nekodiet birstē!
 7. Birste ir aprīkota ar automātisku izslēgšanās funkciju.
- Pēc laika (apmēram 2 minūtes) tā pati izslēdzas.
8. Ja vēlaties birsti izslēgt ātrāk, nospiediet pogu "ON / OFF".
 9. Pēc zobu tīrīšanas, noskalojiet birstes galvu zem tekošas ūdens.

Strāvas instrukcijas:

1. Baterijas: 1 AA 1,5 V (nav iekļauta komplektā)
 2. Lai nomainītu bateriju, pagrieziet baterijas vāciņu pa kreisi un noņemiet to.
 3. Ievietojiet akumulatoru. Ievietojot, ievērojiet pareizo polaritāti
 4. Nofiksējiet akumulatora vāciņu un pagrieziet to pa labi bloķētā stāvoklī.
- Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes baterijas.
 - Baterijas drīkst ievietot tikai pieaugušais.
 - Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētas uzlādējamās baterijas.
 - Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai vai citiem siltuma avotiem
 - Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
 - Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, izņemiet bateriju.
 - Atbrīvojaties no baterijām tam paredzētās vietās.
 - Ja bateriju elektrolīts nonāk acīs, ievērojiet zemāk sniegtos norādījumus:

Ja bateriju šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu tekoša ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Problēmu novēršana:

Problēma	Iemesls	Risinājums
Zobu birste nestrādā	Pārbaudiet vai zobu birstē ir ievietotas baterijas. Pārbaudiet vai baterija nav izlādējusies	Ievietojiet jaunu bateriju ierīcē 1.gab AA baterija 1.5 V
Vāja/nepietiekoša vibrācija	Tiek lietots pārmērīgs spiediens .	Samaziniet spiedienu pret zobiem .
Zobu birste darbojas īsu laiku	Baterija ir izlādējusies.Ir nostrādājis 2min taimeris	Ievietojiet jaunu batareju ierīcē

VIDES AIZSARDZĪBA

Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces iegādes cenu - neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājat to paredzētajās atkritumupieņemšanas vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai tuvāko atkritumu savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu.

SERVISS

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam

produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTIJA

Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Зубная щетка Family SONIC SA605

Инструкция по применению

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


Защищайте устройства от воды:

1. Не погружайте корпус устройства в воду или другие жидкости на длительное время.
2. Регулярно проверяйте устройство на наличие трещин или других повреждений. А так же проверяйте щетинки зубной щетки, чтобы они не шатались и не выпадали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


1. Используйте этот продукт только так как описано в этой инструкции.
2. Дети могут использовать устройство только под надзором уполномоченного лица.
3. Если в зубной пасте содержится перекись, сода или другой бикарбонат, то после использования щетки, необходимо тщательно очистить головку и ручку щетки.
4. Если при использовании устройства у вас появляются неприятные ощущения или боль в ротовой полости, прекратите использование устройства и свяжитесь со своим зубным врачом.
5. Не оставляйте устройство в месте, где высокая температура, пыль, соль или химические чистящие средства.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

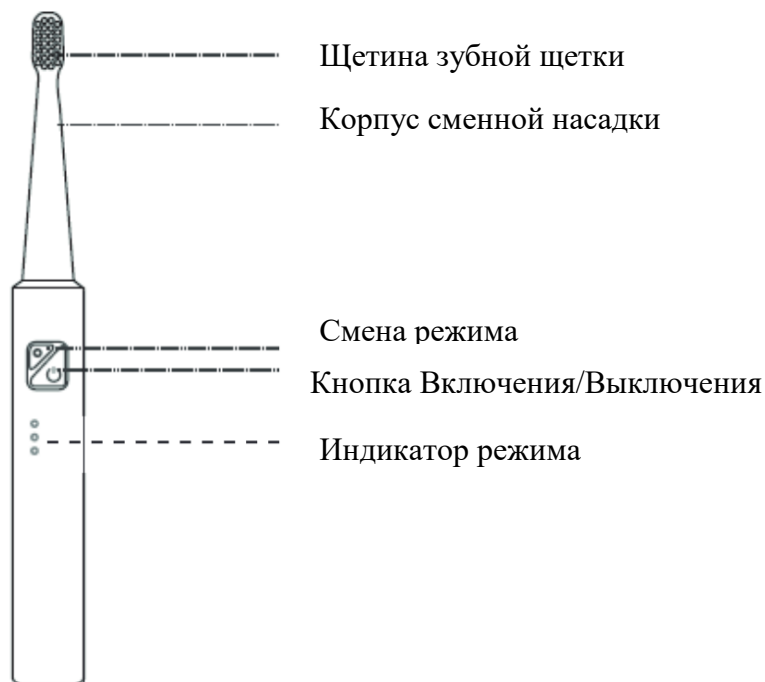

Установка или замена насадки:

- 1) Установка насадки: совместите канавку на основании насадки щетки с отметкой канавки на корпусе прибора и вставьте ее. Поверните насадку налево, в соответствии с направлением стрелки, пока не услышите щелчок (см. рис. А).
- 2) Чтобы снять головку щетки: Возьмитесь за головку щетки. Поверните ее направо, в соответствии с направлением стрелки. Извлеките головку щетки (см. рис. В).

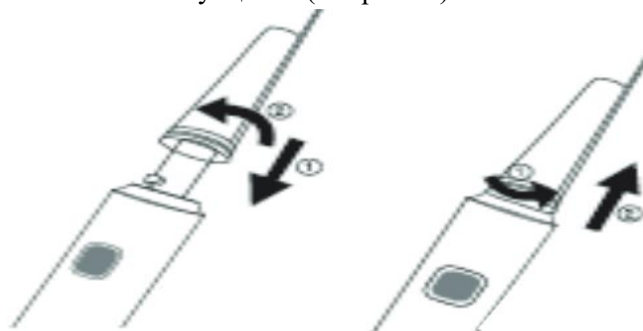

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

1. Снимите защитную оболочку с зубной щетки.
2. Намочите щетину зубной щетки и нанесите зубную пасту.
3. Держите зубную щетку на зубах/деснах с не большим давлением.
4. Нажмите кнопку ON/OFF и начните чистить зубы.
5. Для смены режима, нажмите кнопку «Режим».
6. Легко и медленно передвигайте щетку между зубов. Не кусайте щетку!
7. Щетка оснащена автоматической функцией выключения. Через ~2 минуты она сама выключится.
8. Если хотите выключить щетку быстрее, нажмите кнопку ON/OFF.
9. После чистки зубов, ополосните головку щетки под текущей водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПИТАНИЯ

1. Батарейки: 1 AA 1,5В (не входит в комплектацию).
2. Для смены батареек, поверните крышку батареек налево и снимите ее.
3. Поместите батарейку. Соблюдайте полярность.
4. Зафиксируйте крышку от батареек и поверните ее направо в заблокированном состоянии.
 - Мы советуем использовать батарейки высшего качества.
 - Менять батарейки может только совершеннолетнее лицо.
 - Если вы используете перезаряжаемые батарейки, то используйте только специально предназначенные для этого батарейки.
 - Не храните батарейки при высоких температурах, на прямых солнечных лучах или вблизи других источников тепла.
 - Если устройство не используется длительное время, то извлеките батарейку.
 - Сортируйте мусор и не выкидывайте батарейки вместе с общими бытовыми отходами.
 - **!!! Если щелочной электролит из батарейки попадет в глаза, соблюдайте данные указания: Если жидкость из батарейки попала в глаза, незамедлительно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь за медицинской помощью!**

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Зубная щетка не работает	Проверьте, установлены ли батарейки в зубную щетку. Проверьте, не разрядились ли батарейки.	Установите в устройство новую батарейку 1 шт. AA 1.5В
Слабая/недостаточная вибрация	Используется чрезмерное давление.	Уменьшите давление на зубы.
Зубная щетка работает менее 2 мин/ недостаточное время	Батарейка разряжена. Или сработал таймер на 2 минуты.	Установите в устройство новую батарейку 1 шт. AA 1.5В

Гарантия не распространяется на: Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намочение, неправильное использование и т.п.); Естественный износ устройства в результате длительного использования; Повреждение от неправильного использования или хранения устройства; Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо

другой аналогичной причины; Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

СЕРВИС: Если с вашим устройством возникли проблемы, обратитесь к распространителю для ремонта вашего прибора. При использовании изделия тщательно соблюдайте указания данной инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не выполнили указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации. Ни производитель, ни продавец несет ответственность за любое обслуживание или ремонт, выполненный третьими лицами. Пользователь не должен пытаться самостоятельно ремонтировать устройство.

Ремонтные работы, выполняемые третьими лицами, аннулируют гарантийное требование. Каждый продукт, находящийся в производстве, проходит систематические проверки. Производительность продукта соответствующая, калибровка или валидация не требуется. Если ваш продукт работает не так, как ожидалось, если в процессе эксплуатации изменяется работа основных функций, обратитесь к своему распространителю

Внимание! Использование этого продукта связано с личной гигиеной.

Правила No. 255 Кабинета министров «Правила о дистанционном договоре» пункт 22, подпункт 5 определяют что: “Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку товара, который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям



Защита окружающей среды: Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что это устройство нельзя сдавать вместе с обычным бытовым мусором – оно сдается в специальных местах сбора электроприборов.

Страна-поставщик: Чешская Республика