

Magnētiskā muguras korsete Lietošanas instrukcija


Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju

Produkta specifikācijas un izmantošana:

- 12 iešūti magnēti.
- Materiāls: 70% neoprēns + 30% poliamīds.
- Velcro stiprinājums, regulējamas siksnas
- Apkārtmērs ne vairāk kā 116cm, augstums 40cm, stiprinājuma siksnas neizstieptā veidā 38cm + plecu siksnas 16cm.
- Atbalsta pareizu stāju
- Mazina sāpes, kas saistītas ar sliktu stāju
- Šūtie magnēti stimulē akupresūras punktus aizmugurē
- Uzlabo asinsriti.

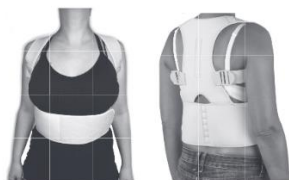

Tīrīšana un apkope:



Mazgāšana ar rokām



Apģērbu nedrīkst apstrādāt ar balinātāju



Negludināt.



Netīrīt ķīmiskajā tīrīšanā



Neizgrieziet centrifūgā.

BRĪDINĀJUMS. Produktus, kuros ir magnēti, nedrīkst lietot cilvēki ar elektrokardiostimulatoru, automātisko defibrilatoru, insulīna sūkni vai grūtnieces. Nelietot uz atklātām brūcēm.

BRĪDINĀJUMS: Šajos produktos ir magnēti. Izvairoties no kontakta ar datoru, cieto disku, audio, video kasetēm vai citiem datu nesējiem.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ." Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīniskā ierīce.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.